



# Enthaltene Programmänderungen

## DMP-Assist Version 3.7.1.0

### Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Inhalte des Updates</b> .....	<b>3</b>
1.1	Neues KBV-Prüfmodul .....	3
1.2	Kompatibilität Brennsoftware.....	3
<b>2</b>	<b>Systemvoraussetzungen</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Datensicherung vor dem Update</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Die Installation des Updates</b> .....	<b>5</b>
4.1	Wichtige Hinweise zum Update.....	5
4.2	Update Installation am Server .....	5
4.3	Update Installation am Client .....	8

## 1 Inhalte des Updates

### 1.1 Neues KBV-Prüfmodul

Mit diesem DMP-Assist Update erhalten Sie das neue KBV-Prüfmodul für das Quartal 1/2008.

### 1.2 Kompatibilität Brennsoftware

Mit diesem DMP-Assist Update wurde die Kompatibilität zu der Brennsoftware Nero Burning Rom Version 8 implementiert.


## 2 Systemvoraussetzungen

Das DMP-Assist Update in der Version 3.7.1.0 benötigt für die Installation folgende Voraussetzungen:


- Installierte DMP-Assist Version 3.4.1.0
- 200 MB freier Festplattenspeicher auf dem DMP-Assist Server.
- 50 MB freier Festplattenspeicher auf dem DMP-Assist Client.

## 3 Datensicherung vor dem Update

Erstellen Sie vor der Installation des Updates eine Sicherung Ihrer aktuellen DMP-Assist Daten. Beenden Sie hierfür auf allen anderen Arbeitsplätzen alle noch laufenden DMP-Assist Anwendungen. Anschließend starten Sie bitte am Server den DMP-Assist entweder von dem Desktop aus oder aus der Programmgruppe Start Programme DMP-Assist30 DMP-Assist 3.0 heraus. Wechseln Sie danach in das Menü Extras Datensicherung Sicherung. Es erscheint folgende Hinweismeldung:

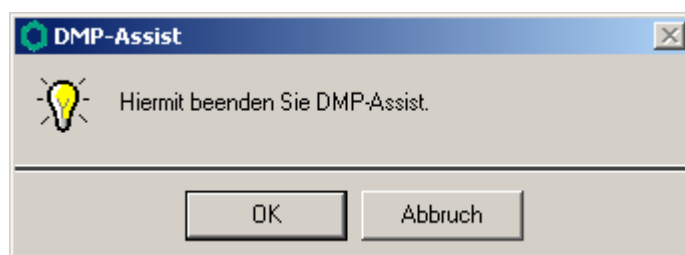

Bestätigen Sie bitte die Hinweismeldung mit dem Druckknopf OK. Der DMP-Assist wird geschlossen und folgende Hinweismeldung wird Ihnen angezeigt:

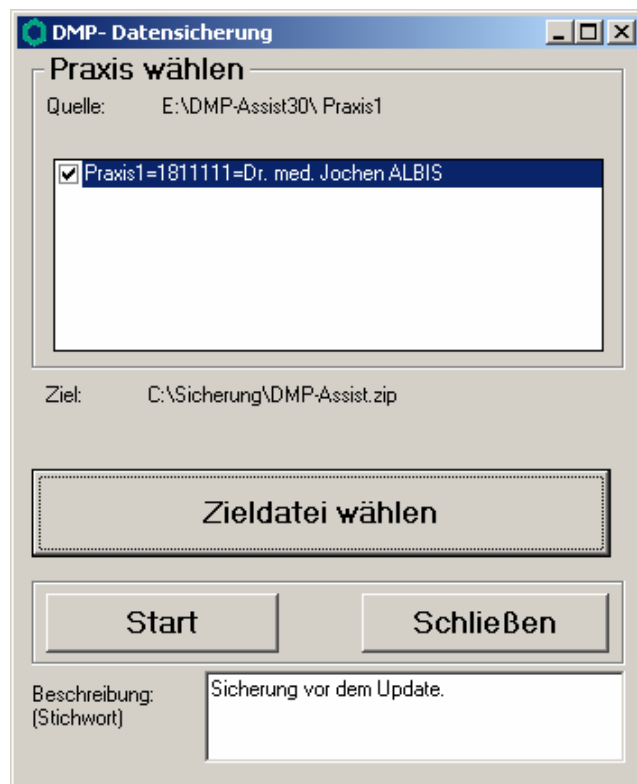

Markieren Sie bitte zuerst die Praxis, die Sie sichern möchten. Im Anschluss wählen Sie über den Druckknopf **Zieldatei wählen** ein Verzeichnis für Ihre Sicherung aus. Geben Sie im Feld **Beschreibung** einen Kurztext ein, warum diese Sicherung erstellt wird. Bitte Betätigen Sie den Druckknopf **Start**, die Sicherung wird nun erstellt. Nach erfolgreicher Erstellung Ihrer Datensicherung erhalten Sie folgende Hinweismeldung:



Quittieren Sie die Meldung mit dem Druckknopf **OK** und verlassen Sie die DMP-Datensicherung über den Druckknopf **Schließen**.


## 4 Die Installation des Updates

### 4.1 Wichtige Hinweise zum Update

Bitte Informieren Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig über die Änderungen, die in diesem Update enthalten sind.

Die Installation der DMP-Update CD wird ausschließlich am DMP-Assist Server vorgenommen. Die Aktualisierung der DMP-Assist Nebenstellen erfolgt nach dem Server-Update bei dem ersten Programmstart des DMP-Assist Client automatisch.

Vor der Installation der neuen Programmdateien prüft das Update automatisch, ob noch DMP-Assist Anwendungen auf den Nebenstellen gestartet sind und ob alle Zugriffe auf die Datenbank geschlossen sind. Ist dies nicht der Fall, so erscheint folgende Hinweismeldung:

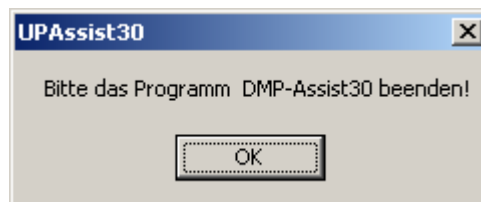

Bitte kontrollieren Sie in diesem Fall alle Rechner darauf, dass kein DMP-Assist Programm mehr gestartet ist und wiederholen Sie die Installation des Updates.

### 4.2 Update Installation am Server

Legen Sie die DMP-Assist Update-CD in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Server-Rechners ein. Wenn die Autostart-Funktion Ihres Windows-Systems aktiviert ist, dann startet automatisch das Installations-Programm.


Wenn das Update nicht automatisch starten sollte, haben Sie die Möglichkeit, die CD manuell zu starten. Wählen Sie hierzu bitte *Start* *Ausführen* und geben im Feld *Öffnen* folgenden Pfad ein:

**[X]:\DMPstart.exe**


**[X]** ist dabei durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD/DVD-Laufwerks zu ersetzen. Wenn Ihr CD/DVD-Rom den Laufwerksbuchstaben **D** hat, dann muss die Eingabe wie folgt sein:

**D:\DMPstart.exe**


Im Anschluss, bzw. sobald die Autostart-Funktion aktiviert ist, wird Ihnen der folgende Dialog angezeigt:

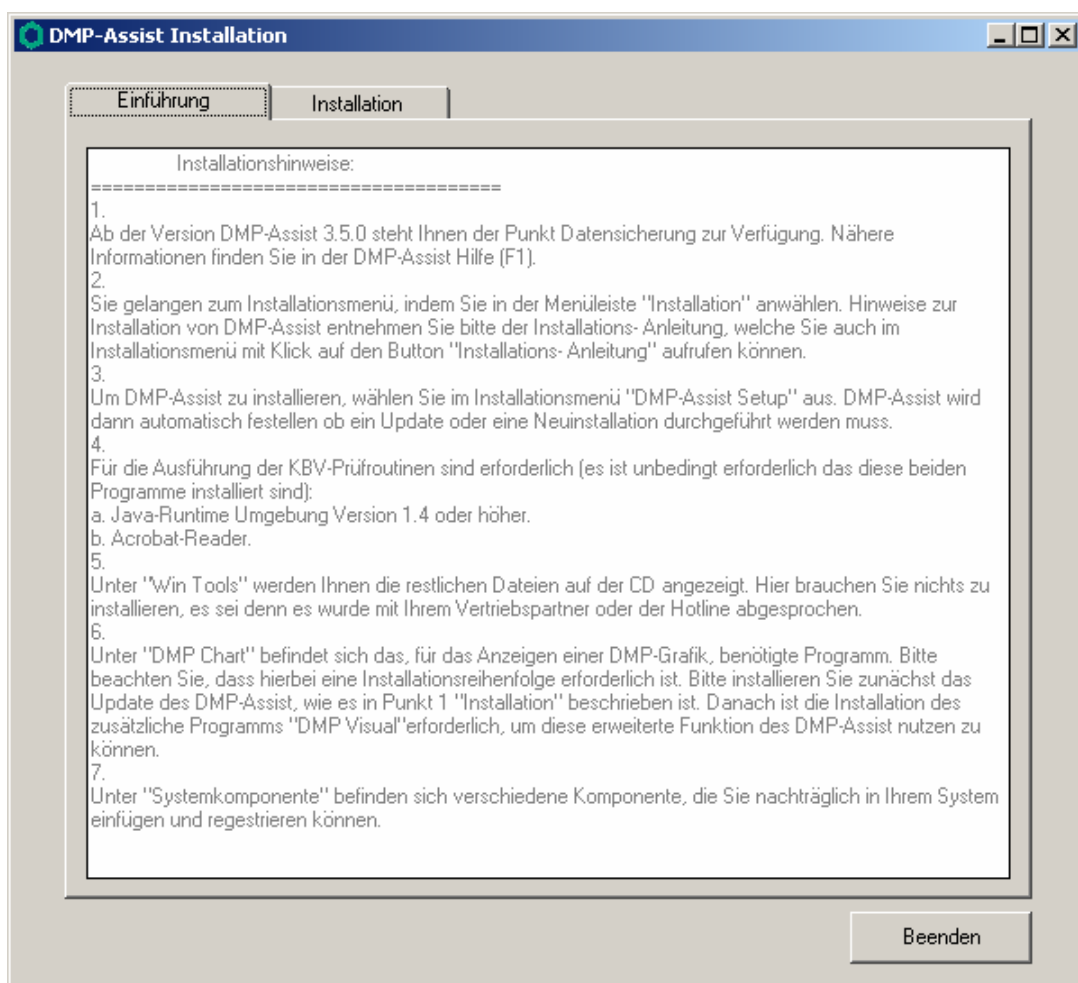


Wechseln Sie bitte auf das Register Installation und klicken den Eintrag DMP-Assist Setup an.

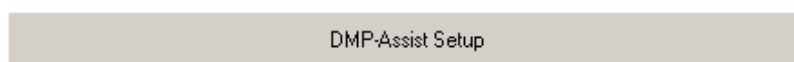

Im Anschluss startet das DMP-Assist Update Programm.

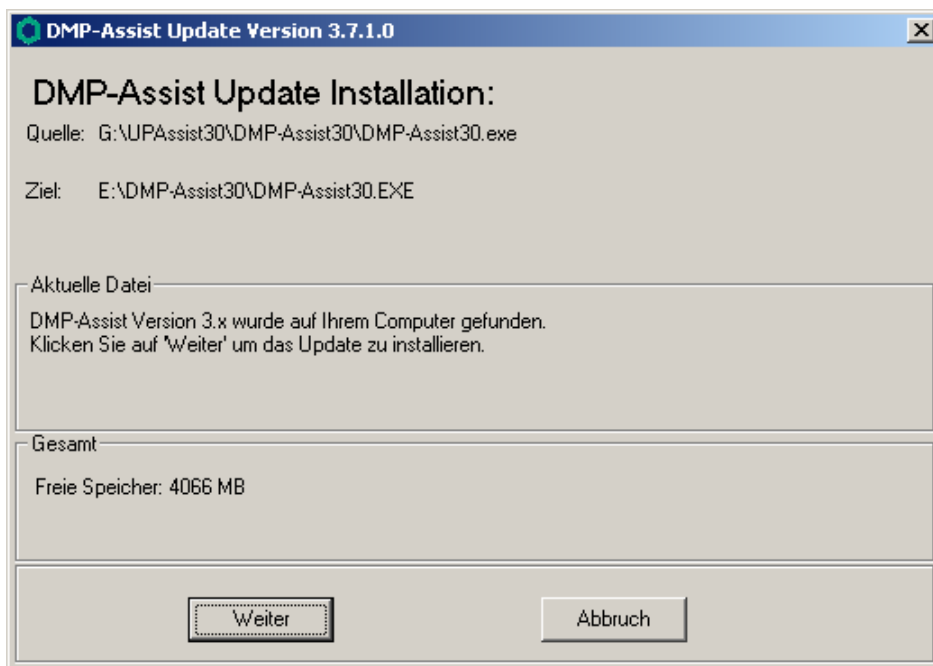

Klicken Sie bitte auf den Druckknopf **Weiter**, um zum nächsten Schritt in der Update-Installation zu gelangen.

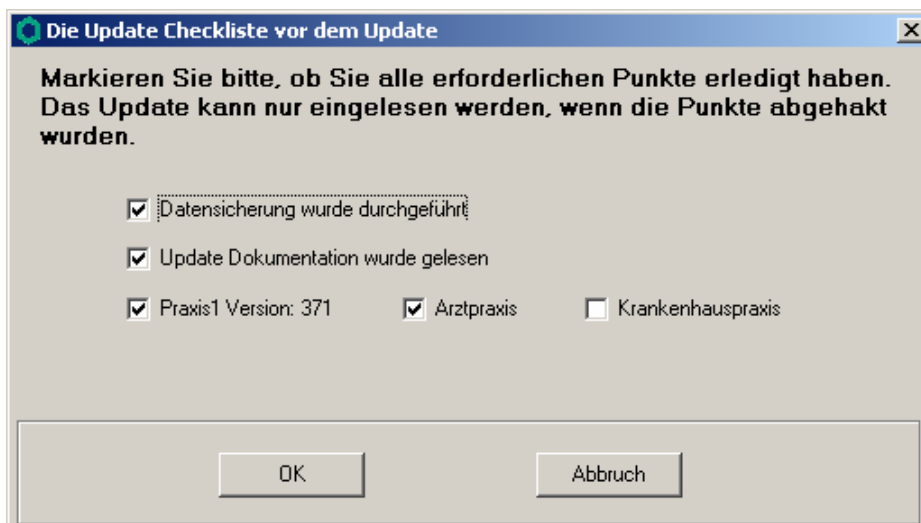

Bevor mit der Installation der neuen Programmdateien begonnen werden kann, füllen Sie bitte die Update-Checkliste, wie oben gezeigt, aus.

#### Datensicherung wurde durchgeführt

- Bestätigt die Durchführung einer aktuellen Datensicherung Ihrer DMP-Assist Daten.

#### Update Dokumentation wurde gelesen

- Bestätigt, dass die Update-Dokumentation aufmerksam gelesen wurde.


#### Praxis1 Version: 360

- Bestätigt Ihnen, dass Ihre DMP-Assist Datenbank gefunden wurde und in der korrekten Version 3.6.0.0 vorliegt.

#### Arztpraxis / Krankenhauspraxis

- Wählen Sie hier die für Sie geltende Praxisform.

Nachdem Sie alle Punkte abgehakt haben, starten Sie bitte den Kopiervorgang mit dem Druckknopf **OK**. Ist die Update-Installation erfolgreich abgeschlossen, so erscheint folgende Hinweismeldung:

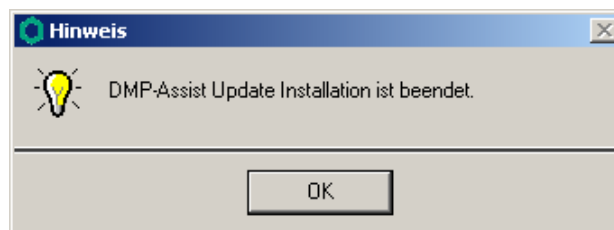


Beenden Sie bitte das Update-Programm mit dem Druckknopf **OK** und verlassen Sie die DMP-Assist Installation über den Druckknopf **Beenden**. Die DMP-Assist Update-CD wird nun nicht mehr benötigt. Bitte entnehmen Sie die CD aus Ihrem CD / DVD-Laufwerk und archivieren Sie die CD zusammen mit der Update-Dokumentation bei Ihren Praxis Unterlagen.

### **4.3 Update Installation am Client**


Um den DMP-Assist auf den Nebenstellen zu aktualisieren, starten Sie bitte das Programm entweder vom Desktop aus oder aus der Programmgruppe `Start Programme DMP-Assist30 DMP-Assist 3.0` heraus.

Die DMP-Clientanwendung erkennt automatisch, dass auf dem DMP-Assist Server eine neue Programmversion eingespielt wurde und zeigt Ihnen folgende Meldung:



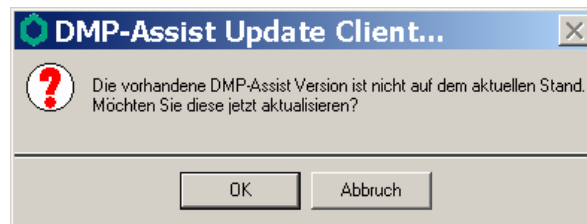

Bestätigen Sie die Meldung mit dem Druckknopf **OK**. Anschließend wird Ihnen folgende Hinweismeldung angezeigt:

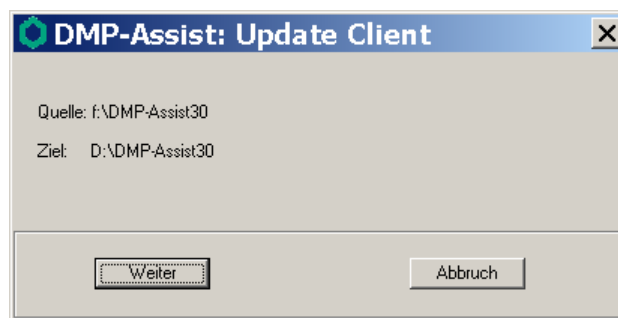

Um die Installation für das Client-Update zu starten, klicken Sie bitte auf den Druckknopf **weiter**. Nachdem alle neuen Programmdateien erfolgreich auf die Nebenstelle kopiert sind, erscheint folgende Hinweismeldung:

